

2. 实验步骤

染色体核型分析:

- 将玻片置于37℃预热的吉姆萨染色液中,染色 ≥20分钟。(此时去细胞间)
- 2) 自来水(小水)冲洗玻片背面, 烘箱中吹干玻片。
- 3) 计数约5-10个自制玻片中分裂相,统计含有正常染色体数目的分裂相的比例。






2. 实验步骤

小鼠胚胎干细胞复苏:

- 1) 在离心管中加入3 ml FM;
- 2) 从干冰中取出保存的ES细胞,快速放入37℃水浴锅中,摇晃至细胞大部分融化;
- 3) 向冻存管加入500ul FM,将冻存管中的ES细胞移入已预 先加有3ml FM的离心管中,混合;
- 4) 1000 rpm离心5分钟;
- 5) 吸去培养皿中的Gelatin, 加入1.5ml ESM;
- 6) 离心完成后,加入500ul 预热的ESM重悬后,全部接种于已换好液的培养皿中;
- 7) 24h后观察并记录细胞状态。

2. 实验步骤

小鼠胚胎干细胞复苏:

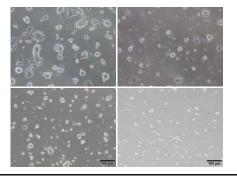



2